

Ficha Técnica Sistema Cuchilla Cortadora Me Medical

1. Información del Producto:

1.1. Descripción de la Máquina Cortadora:

Cuchillo cortador de vello, quirúrgico, es un dispositivo que se utiliza para eliminar el vello y cabello corporal antes de una intervención (quirúrgica) o un tratamiento médico. Debe ser utilizado por profesionales médicos y enfermeras. Esta cortadora quirúrgica (máquina de afeitar) funciona con una batería de litio recargable. La máquina quirúrgica consta de una máquina de afeitar (que contiene la batería), una hoja desechable de un solo uso (para acoplar a la máquina) y una estación de carga.

Características de la Máquina Cortadora:

- Eliminación eficaz del vello corporal tanto en superficies húmedas como secas.
- Cuchilla desechable fácil de usar
- Tecnología de batería avanzada y tiempo de carga corto.
- Protección contra sobrecarga de la batería.

Estación de Batería



Único sistema con Cabeza giratoria de 45° de izquierda a derecha. Esto permite una operación fácil y segura en áreas difíciles del acceso.



Agarre antideslizante: sin riesgo de lesiones por resbalones



Protección contra cortes: El diseño de la cuchilla desechable evita contacto de la hoja con la piel, esto evita cortes dolorosos y lesiones en la piel



Fácil inserción y expulsión de la cuchilla: La hoja única se puede insertar fácilmente con dos dedos en el cabezal de afeitado. Fácil expulsión de la cuchilla desechable con el botón de expulsión

Especificación	Descripción Maquina Universal Referencia SC004
Material de la maquina y estación de carga	ABS no tóxico, copolímero de acril-butadieno-estireno.
Batería	Ion litio recargable en 120 minutos al 100%. Autonomia Duración 160 min. Posee indicador del estado de carga. Li-ion 3.7V ICR 18650MAB 1800mAh
Limpieza	Agua y jabón Enjuague con agua fría o tibia Y secado con toalla limpia.
Desinfección	Jabón antimicrobiano.
Resistencia al Agua	La Máquina se puede sumergir en agua a máximo 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos.
Garantía	2 años
Voltaje del motor	Corriente continua de 3,7 voltios
Corriente sin carga	0,18 A
Corriente de carga	0,7A
Velocidad	350mm/s ²
Adaptador de CA	ENTRADA: 220V – 50/60 Hz 0,4 A
Salida	5.0Vdc 2A
Pantalla	LED Digital Modo On/Off con indicar de carga
Grado de protección frente a fluidos	5.0Vdc 2A
Grado de protección frente a fluidos	IPX 7 (según normativa EN60259)
Clase de aislamiento eléctrico	II (según normativa CEI 62-5)
Peso neto de la maquinilla	Con cuchilla 142 g Sin cuchilla 132 g
Peso neto de la maquinilla	Con cuchilla 142 g Sin cuchilla 132 g

1.2. Descripción de cuchillas cortadoras: Compatibles con Máquina Cortadora ME Medical


Cuchilla Universal referencia SC002:

La cuchilla universal es diseñado para la mayoría de los cabellos y necesidades de corte.



Cuchilla Neuro referencia SC003:

La cuchilla Neuro es diseñado para cabello grueso o denso abundante y en áreas como cabeza o pecho.

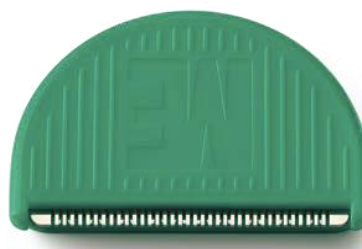

Especificación	Descripción Cuchilla Neuro SC002
Material Cuchilla	Acero Inoxidable 420j2
Ancho del corte de la hoja	36 mm
Profundidad de corte del cabello restante	0,3 mm

Especificación	Descripción Cuchilla Neuro SC003
Material Cuchilla	Acero Inoxidable 420j2
Ancho del corte de la hoja	36 mm
Profundidad de corte del cabello restante	0,4 mm

2 Advertencias

- No usar en caso de daño del envase.
- No reutilice el producto. Está indicado como desechable para un solo uso.

3 Información Adicional

- No estéril
- Libre de látex
- Factor de empaque: 50 unidades por caja.
- El proceso de fabricación cumple con los requisitos de ISO9001:2008
- Norma ISO 13485:2016
- Fabricante: ME Medical AG, Suiza

4 Información del proveedor

Nombre del fabricante: Me Medical

Nombre de la marca: ME Medical AG, Suiza

1.3 Referencias (referencias) correspondientes:

- REF SC004 ME Medical™ Professional Clipper (con estación de carga)
- REF SC002 Cuchilla de un solo uso UNIVERSAL para Modelo SC001/SC004
- REF SC003 NEURO Cuchilla de un solo uso para Modelo SC001/SC004