




Ultra Comfort SE

Stretcher Support Surface

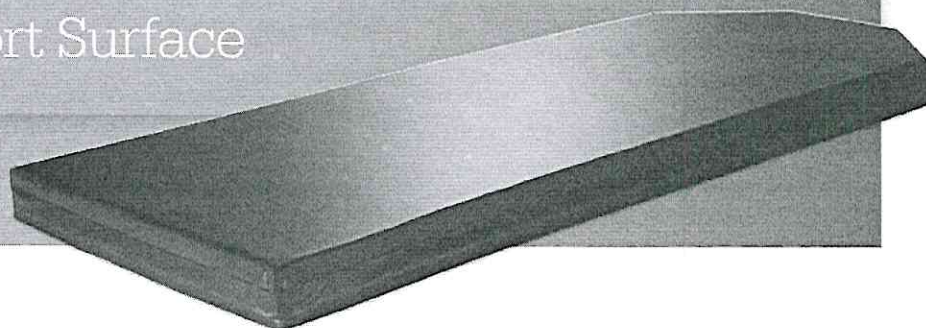


Helping to transform the standard of stretcher support surfaces

When we developed the SE series of stretcher surfaces, we focused our design on aiding in proactive prevention.

The Ultra Comfort SE Support Surface was designed with the overall patient experience in mind and has specific features to assist in improving outcomes.¹


Key Features

- Polycarbonate polyurethane cover* provides increased chemical resistance
- Welded seams are RF welded to reduce fluid ingress and infiltration
- Three-sided zipper allows for inspection of the condition of internal components
- 700 lb. (317 kg) weight capacity
- X-ray compatible

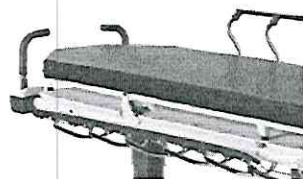

Compatible with our stretchers

The Ultra Comfort SE Support Surface's design and thickness allows for compatibility with Stryker's stretchers.

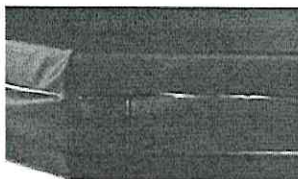

Welded seams

Seams are a common problem area for infection. The Ultra Comfort SE cover is sealed with a specific type of electromagnetic bonding utilising RF welding to reduce fluid ingress and infiltration.



Three-sided zipper

Caregivers can now inspect the condition of internal components of the stretcher surface with the new three-sided zipper.




Durability

The Ultra Comfort SE Support Surface's cover is engineered for ease of use, especially during the maintenance and care process.



Ultra Comfort SE

Stretcher Support Surface

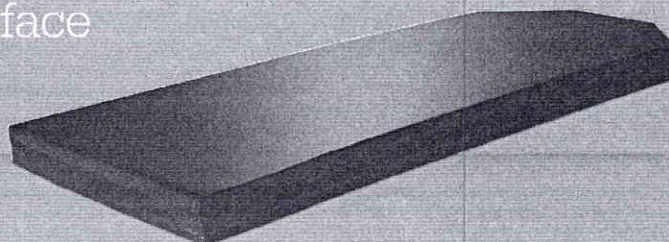

Standard features

- Polycarbonate polyurethane cover*
- Welded seams
- Three-sided zipper
- Fire barrier
- 700 lb. (317 kg) weight capacity
- Compatible with Stryker's stretchers

Specifications

Model number	1703-034-301	1704-034-301	1704-034-601
Overall width	30 in (76 cm)	30 in (76 cm)	26 in (66 cm)
Overall length	76 in (193 cm)	76 in (193cm)	76 in (193 cm)
Thickness	3 in (7.6 cm)	4 in (10 cm)	4 in (10 cm)
Weight capacity	700 lb. (317 kg)	700 lb. (317 kg)	700 lb. (317 kg)

Flammability standards for polycarbonate polyurethane cover: CALTB117; 16CFR1632; CGSB CAN 2-4.2
Method 27.7-M77; BS EN 597-1; BS EN 597-2; CAL TB129; 16CFR1633; BS 6807, Clause 9; BFD IX-11; UNI9175

Stryker reserves the right to change specifications without notice.

Warranty

Stryker Medical, a division of Stryker Corporation ("Stryker"), warrants that its Model 1703 and 1704 Ultra Comfort SE Support Surface. Product will be free from defects in material and workmanship. Stryker's warranty covers only the following items during normal use as follows:

- Core assembly: one (1) year
- Fire barrier: one (1) year
- Support surface cover: one (1) year

1. Recommended to be implemented in combination with clinical evaluation of risk factors and skin assessments made by a healthcare professional.

This document is intended solely for the use of healthcare professionals.

A healthcare professional must always rely on his or her own professional clinical judgment when deciding whether to use a particular product when treating a particular patient. Stryker does not dispense medical advice and recommends that healthcare professionals be trained in the use of any particular product before using it in surgery.

The information presented is intended to demonstrate the breadth of Stryker product offerings. A healthcare professional must always refer to the package insert, product label and/or instructions for use before using any Stryker product.

Products may not be available in all markets because product availability is subject to the regulatory and/or medical practices in individual markets. Please contact your Stryker representative if you have questions about the availability of Stryker products in your area.

Stryker Corporation or its divisions or other corporate affiliated entities own, use or have applied for the following trademarks or service marks: Strker, Ultra Comfort SE. All other trademarks are trademarks of their respective owners or holders.

The products depicted are CE marked in accordance with applicable EU Regulations and Directives.

OTHMED-SS-15_13786
DFS 04/2017
2017-13786

Copyright © 2017 Stryker
stryker.com

Colchoneta para Camilla 190x Alta densidad

~~\$86.990 CLP~~ **\$81.127 CLP** **Oferta**

Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

Uso:


- Clínico y Hospitalario
- Camillas de Exploración
- Rehabilitación y Fisioterapia
- Mesas de Kinesiología
- Estética y Spa

Características:

- Medida extendida: 190x60x8cm
- Medida plegada: 120x16x60cm
- Grosor 8cm de alto
- Alta densidad, apto para apoyos prolongados
- Material Lavable PU-Leather
- Posee cierre para cambiar su funda
- Peso 18 Kg

Embalaje: Film transparente 120x16x60cm Peso 18kg

 [Compartir](#)

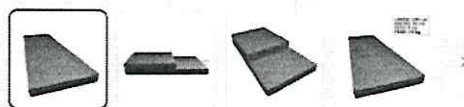

MUEBLES CLÍNICOS

COLCHONETA PARA CAMILLA DE TRASLADO

RLIMP019


RLIMP019 Colchoneta rectangular de una sola pieza diseñada para equipar camillas de examen o traslado, brindando una superficie de apoyo continua, cómoda y fácil de sanitizar.

Su composición combina un núcleo de espuma y una funda impermeable lavable con cierre, lo que permite mantener altos estándares de higiene en servicios clínicos, de urgencias y transporte de pacientes.

192 CM

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Diseño anatómico rectangular:** pensada para cubrir el largo completo de la camilla, ofreciendo apoyo uniforme desde la cabeza hasta los pies.
- **Núcleo de espuma de alta densidad:** contribuye al confort del paciente y ayuda a distribuir la presión sobre la superficie de contacto.
- **Funda impermeable y lavable:** superficie que actúa como barrera frente a derrames y humedad, compatible con rutinas frecuentes de limpieza y desinfección.
- **Cierre lateral de recorrido completo:** permite retirar la funda con facilidad para lavado o reemplazo sin dañar el relleno interno.
- **Esquinas rectas con una punta biselada:** favorecen el calce sobre camillas con cabecera inclinada o sector superior redondeado.

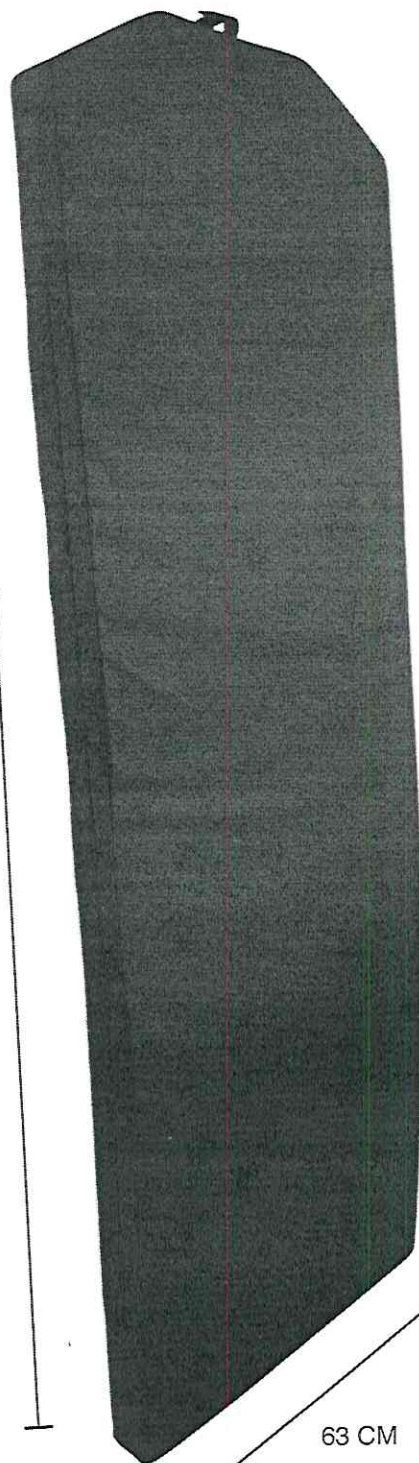

63 CM



MUEBLES CLINICOS DE TRASLADO COLCHONETA PARA CAMILLA

RLIMP019

- **Asa de sujeción en un extremo:** facilita el manejo, transporte y reposicionamiento de la colchoneta sobre la estructura de la camilla.
- **Espesor de 9 cm:** otorga una amortiguación adecuada manteniendo estabilidad para el paciente durante exámenes o traslados.

MODO DE USO:

- **Verificar** que la estructura de la camilla esté limpia y sin elementos que puedan perforar la funda.
- **Posicionar la colchoneta centrada** sobre la camilla, orientando la esquina biselada hacia la cabecera si corresponde.
- **Comprobar que el cierre de la funda** esté completamente cerrado antes de ubicar al paciente.
- **Cubrir la superficie** con sábana desechable o protector acorde a los protocolos de la institución.
- **Tras su uso,** retirar la ropa de cama, revisar el estado de la funda y, si es necesario, limpiar siguiendo las indicaciones de mantenimiento.

